

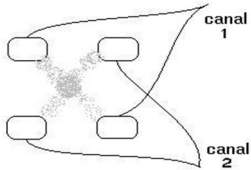
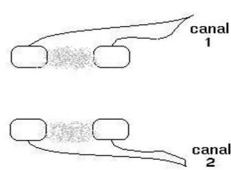
CORRENTE GALVÂNICA

Corrente polarizada

POLO	POSITIVO	NEGATIVO
EFEITO	Vasoconstrição	Vasodilatação
COR	Vermelho (Ânodo)	Preto (Cátodo)
Frequência	Não tem	
Tempo	5 a 10 minutos – Agudo 8 a 12 minutos – Subagudos 10 a 15 minutos – Crônicos Iontoforese: 2 a 25 minutos (Depende da medicação)	
Intensidade	Até sensação de formigamento (Não pode sentir: agulhada, queimação ou dor)	
Cuidados	Manter a esponja sempre úmida (molhar) e não deixar as estruturas metálicas em contato com a pele do paciente pelo risco de queimadura (após 5 min parar e observar a pele)	

CORRENTE TENS

Analgesia

Modo	CONVENCIONAL	ACUPUNTURA	BREVE-INTENSA	BURST
Largura de pulso	Curta 50-10 μ s	Longa 150-200 μ s	Longa 100-150 μ s	200 μ s
Frequência	Alta (80-150 Hz)	Baixa (1-10 Hz)	Alta (>80 Hz)	Baixa (trem) (1-5 Bups) Alta (100 Hz)
Amplitude corrente	Confortável	Tolerável	Tolerável	Confortável
Indicação	Analgesia curta (comportas)	Analgesia longa duração (Liberação de opioides endógenos)	Analgesia rápida e intensa para procedimentos dolorosos (ex.: desbridamento, manipulação articular)	Analgesia longa duração (Liberação de opioides endógenos)
Tempo	20-30 min	20-30 min	5-15 min	30-40 min
Intensidade	Baixa (sensação formigamento confortável, sem contração muscular)	Moderada a alta, (contração muscular visível sem desconforto)	Alta, até o limiar da dor, causando desconforto tolerável	Moderada a alta, com contração muscular perceptível
Aplicação	Cruzado  Paralelo 			

CORRENTE FES

Corrente de baixa frequência, quadrática, bidirecional despolarizada utilizada no fortalecimento de músculos inervados

PROTOCOLOS	FORTALECIMENTO MUSCULAR	CONTROLE ESPASTICIDADE	FACILITAÇÃO NEUROMUSCULAR
Modo	Recíproco (Canal funciona alternadamente: 1 ON e 2 OFF com intervalo) Sincronizado (Dois canais simultâneos: 1 e 2 ON com intervalo)		
Frequência	20 a 50 Hz (contração muscular)		
Largura de pulso	200 a 300 µs		
Relação ON/OFF	1:3	1:5	1:2
Tempo ON	4 a 6 seg	10 a 15 seg	Estímulo manual (disparo pelo terapeuta)
Tempo	30 min	Máx 20 min	Máx 15 min
Intensidade	Suficiente para vencer uma carga adequada	Suficiente evitando fadiga	suficiente para o estímulo “gatilho”
Indicação	Fortalecer um músculo ou grupo muscular debilitado por desuso	Controlar quadro espástico e facilitar o movimento	Aumentar o movimento e facilitar reaprendizagem motora

CORRENTE RUSSA

Músculos Fracos (sedentários) de indivíduos saudáveis (Flacidez muscular)

PROTOCOLOS	SEDENTÁRIO	ATIVO
Modo	Recíproco (Canal funciona alternadamente: 1 ON e 2 OFF com intervalo) Sincronizado (Dois canais simultâneos: 1 e 2 ON com intervalo)	
Frequência	50-80 Hz	80-90
Relação ON/OFF	1:2; 1:3; 1:4	1:1
Tempo ON	4 a 6 seg	10 seg
Tempo	30-50 min	30-40 min
Observação	Menor tempo de contração para não fadigar	Maior tempo de contração com pouco repouso (podendo TOFF ser menor que TON)
Intensidade	Contração muscular (Ajustar a corrente somente no momento ON) intensa mas tolerável e agradável	

➤ Cálculo tempo para eletroestimulação:

(Tempo ON + Tempo OFF) x número de contrações

CORRENTE AUSSIE

Corrente alternada de média frequência modulada em burts de curta duração (maior conforto) para fortalecimento de músculos saudáveis

PROTOCOLOS	ESTIMULAÇÃO MOTORA	DRENAGEM LINFÁTICA	ANALGESIA
Modo	Sincrônico ou recíproco	Sequencial	Contínuo
Frequência portadora	1 kHz	4 kHz	4 kHz
Burts	2 μ s	4 μ s	4 μ s
Frequência	50 Hz	10 Hz	100 a 120 Hz
Rise/ON/Decay/OFF	TOFF $\geq$ TON	-	-
Tempo	Até 30 min (sem fadiga)		
Intensidade	Máxima tolerada sem desconforto		

Na Eletroestimulação, colocação de eletrodos em ponto motor:

